



TruSight™ Oncology Comprehensive

ポータル機能

病院様向けユーザーマニュアル

シスメックス株式会社

目次

はじめに	1
使用目的	2
製品の概要	2
取扱説明書	3
第 1 章 動作環境	4
1.1 動作環境.....	4
第 2 章 安全情報	5
2.1 一般情報.....	5
2.2 コンピューターウイルス	6
第 3 章 TSO Comp. ポータル機能の使いかた	7
3.1 提供する機能.....	7
3.2 検査依頼ワークフロー	7
第 4 章 操作手順	8
4.1 システムにログインする	8
4.2 パスワードを変更/初期化する	13
4.3 お知らせを閲覧する	17
4.4 検査依頼の到着情報を閲覧する	18
4.5 検査依頼の到着情報から検査レポートをダウンロードする	24
4.6 検査依頼を登録する	29
4.7 検査依頼情報を検索/編集/出力する	35
4.8 アカウントを管理する	47
4.9 ダウンロード履歴を検索する.....	55
4.10 各種通知メールの受信設定をおこなう	59
※日付を入力する	62

はじめに

このたびは、TSO Comp. ポータル機能をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管して、いつでも参照できるようにしてください。

- Sysmex、シスメックス、OncoGuide、オンコガイドは、シスメックス株式会社の商標です。
- その他、本書中の会社名、製品名は、各社の商標です。

本書において商標であることが明示されていない場合でも、その使用が許可されているわけではありません。
なお、本書中にはTM、®は明記しておりません。

- サービスのご利用にはあらかじめご利用申込みが必要です。
お手続きが完了した場合にサービスご利用に必要な情報をご連絡いたします。
- 本サービスでは、以下のガイドラインを参考にセキュリティ対応を実施しております。
厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版」
総務省・経済産業省 「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う場合の安全管理に関するガイドライン（令和4年8月31日版）」

販売元

シスメックス株式会社

神戸市中央区脇浜海岸通 1 丁目 5 番 1 号 〒651-0073

お問い合わせ窓口

シスメックス株式会社 TruSight™ Oncology Comprehensive パネルシステム専用窓口

電話番号：0120-085-860

受付時間：月～金曜日 09:00～17:00（祝日・お盆・年末年始・その他休日は除く）

お問い合わせリンク：https://www.sysmex.co.jp/contact/ivd_gene/index.html

使用目的


TSO Comp. ポータル機能は、保険収載版「TruSight™Oncology Comprehensive」アッセイサービスにおける、検査の依頼と出検（検査委託）先での検査進捗の取得、および、出検先からの検査報告書の電子ファイル受け取り機能を提供します。

製品の概要

本製品は、クラウド環境にて、離れた拠点間での検査依頼データおよびファイルの授受をおこないます。

1 全体像

- 本製品は、クラウドサービスとなります。クライアントコンピューター上のインターネットブラウザを經由してデータおよびファイルの受け渡しができます。
- 本製品はネットワーク要件として別途敷設する IPsec-VPN による閉域網もしくは TLS (1.2) を用いた暗号化通信プロトコルで動作します。本書に記載されている内容は、以下の内容で図示されます。

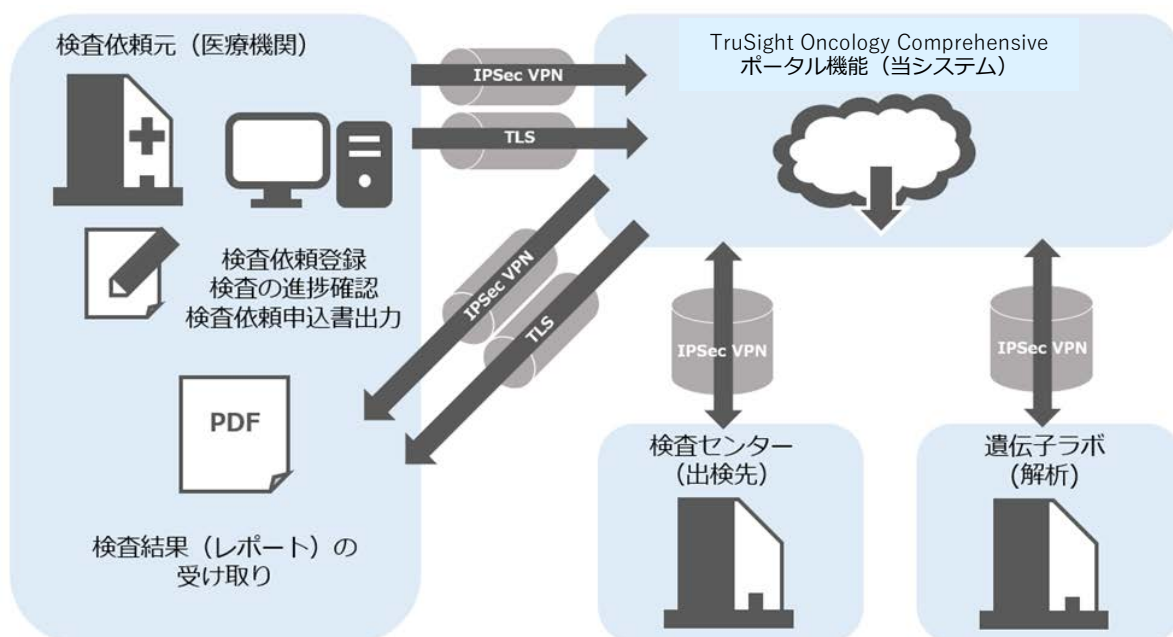

取扱説明書

1 取扱説明書に関する注意事項

- 本書の内容の一部または全部を無断でコピー・転載することは、禁止されています。
- 本書に記載されている患者名、医師名は、実在の人物とは一切関係ありません。
- 本書に記載されている製品の詳細や画面などは一例です。実際の製品と異なる場合があります。
- 本書は内容に関して万全を期していますが、万一、不審な点や誤り、記載漏れなどにお気付きの場合は、別途ご案内の問い合わせ窓口までご連絡ください。

第1章 動作環境

1.1 動作環境

項目	仕様
最低動作環境	OS Microsoft Windows11 又はその上位バージョン MacOS 10.15.2(Catalina)又はその上位バージョン インターネットブラウザ Google Chrome 125 以上 Microsoft Edge (Chromium) 144 以上 上記以外のインターネットブラウザによる動作は保証しておりません。 上記以外のインターネットブラウザを使用する場合、本サービスがご利用できない、または正しく利用できない可能性があります。 メモリ 4GB 以上 CPU IntelCorei3 以上 解像度 1366×768 ピクセル以上 接続回線 インターネット回線（公衆回線上のサーバーへのアクセスが可能なこと） ※ なお、本システムについては C-CAT ポータル/入カツールと同じネットワーク環境下 / 同じ端末での利用を前提としております。
ご注意事項	ご利用のパソコンおよびネットワーク接続機器について、アンチウイルス製品のご利用や適切な設定など、セキュリティ対策はお客様ご自身にてご対応ください。 管理者は、ユーザーごとに適切なアクセス権限を設定してください。アクセス制限が適切に設定されていない場合は、管理者の意図しない変更がおこなわれる恐れがあります。

C-CAT ポータル端末

(C-CAT 入カツール)



(標準的な利用方法)

- ① C-CAT 提供のVPNへ接続
※TLS接続でアクセスする場合は本手順①は不要
- ② C-CAT ポータルへアクセス
- ③ [検査パネルポータル] を選択
- ④ [TSO Comp.] を選択

※詳細は C-CAT から配布の「C-CAT がんゲノム検査ポータル 接続手順書」をご確認ください。

第2章 安全情報

2.1 一般情報

注意

- 管理者は、ユーザーごとに適切なアクセス権限を設定してください。
アクセス権限が適切に設定されていない場合は、第三者に不正に利用される恐れがあります。
- お使いになるコンピューター類は、お客様の施設で定められた運用方針に従い管理およびご使用ください。
- 本サービスから心当たりのないメールを受信された場合はメールの開封および返信をせず、当社シスメックス株式会社 TruSight™ Oncology Comprehensive パネルシステム 専用窓口にお問い合わせください。
- 外部メモリを使用する場合は、セキュリティ機能（パスワードロック・暗号機能）を有したものをご使用ください。
- 本製品はクラウドサービスとなります。お客様による当社の指定するシステム仕様に基づかない接続などはおこなわないでください。
- 製品の使用経験のないかたや浅いかたは、必ず使用経験のあるかたの指導、補助を受けてご使用ください。

参考

- システムに アップデートがある場合には、当社からお知らせがあります。
アップデートは自動でおこなわれます。

2.2 コンピューターウイルス

警告

お客様のご使用方法によっては、ネットワークなどの他の経路からコンピューターウイルスに感染する恐れがあります。

お客様のお使いの環境に応じたコンピューターウイルス対策をご検討頂くことをおすすめします。お客様のお使いの環境でウイルス対策をする場合は、以下の点にご注意ください。

1. 出所の明かでないファイルを不用意に開かないでください。
2. 本サービスの使用に関係しないファイルなどを保存しないでください。
3. 検査データのオンライン目的以外のファイルや、フォルダの共有は避けてください。
4. 他のコンピューターシステムで実施されているコンピューターウイルス対策の内容を確認いただき、有効なもの本サービスをインストールしたコンピューターにも適用をご検討ください。
5. 状況に応じて、ファイアウォールを設置するなど、外部からの侵入に関する対策の適用をご検討ください。

第3章 TSO Comp. ポータル機能の使いかた


3.1 提供する機能

本サービスでは、以下の機能をご利用いただけます。

- 検査依頼登録
- アカウント管理
- お知らせ閲覧
- ダウンロード履歴閲覧

3.2 検査依頼ワークフロー

1 検査依頼の大きな流れ

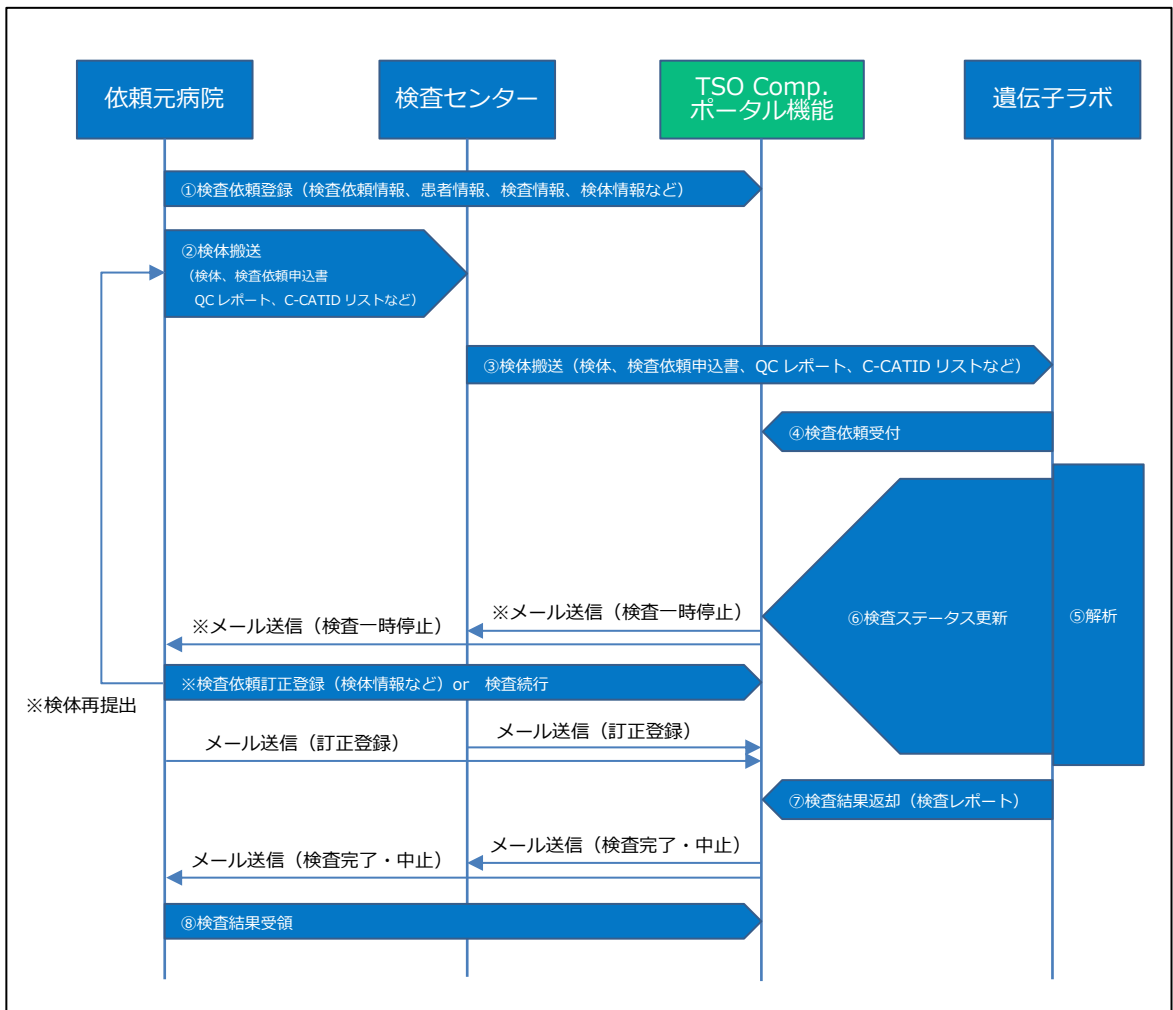

第4章 操作手順

この章では具体的な操作を説明します。万が一、手順通りに操作してエラーが発生したり、操作自体ができなくなったりした場合は、当社 TruSight™ Oncology Comprehensive パネルシステム 専用窓口にご連絡ください。

4.1 システムにログインする

1 ログイン

- 1 ブラウザを起動して、C-CAT がんゲノム検査ポータルにアクセスする
C-CAT がんゲノム検査ポータルのトップページが表示されます。
※C-CAT がんゲノム検査ポータルへのアクセスは、専用のネットワーク接続が必要です。詳しい内容は C-CAT がんゲノム検査ポータルのマニュアルを参照してください。
- 2 [検査パネルポータル]をクリックする
検査パネル選択画面が表示されます。
- 3 [TSO Comp.]をクリックする
TSO Comp. ポータル機能のログイン画面が表示されます。

※ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力し、TSO Comp. ポータル機能のログイン画面を直接開くこともできます。

- ① VPN 接続時 : https://app.oncoguide.net/portal/tso_comp/
- ② TLS 接続時 : https://app.tls.oncoguide.net/portal/tso_comp/



1 施設コード

ログインID

パスワード

ログイン

パスワードの初期化

- 4 [施設コード]、[ログイン ID]、[パスワード]を入力し、[ログイン]ボタンをクリックする

トップ画面が表示されます。

ログイン画面は以下で構成されています。

No	項目名	説明
①	[施設コード]	施設コードを入力します。
	[ログイン ID]	ログイン ID を入力します。
	[パスワード]	パスワードを入力します。 他の人に知られたり、忘失したりしないよう大切に保管してください。
	[ログイン]ボタン	入力した施設コード、ログイン ID、パスワードでログイン認証をおこないます。
	[パスワードの初期化]ボタン	パスワードを忘れた場合など、ユーザー自身でパスワードを初期化します。

2 (※初回ログイン時のみ) パスワード再設定

- 1 TSO Comp. ポータル機能へログインする

初回ログイン時は、パスワード再設定画面が表示されます。

パスワード再設定

新しいパスワードを設定してください。
新しいパスワードは8文字以上20文字以内で、英字(大文字/小文字)・記号・数字を含む必要があります。

パスワード

設定

- 2 8文字以上 20文字以内、英字（大文字/小文字）・記号・数字を含むパスワードを入力し、[設定]ボタンをクリックする

確認メッセージが表示されます。

実行確認

パスワード設定します
よろしいですか？

はい いいえ


- 3 [はい]（設定しない場合は[いいえ]）ボタンをクリックする
パスワード変更完了のメッセージが表示されます。



- 4 [OK]ボタンをクリックする
再度ログイン画面が表示されます。
施設コード、ログイン ID、設定したパスワードを入力し、ログイン認証をおこなってください。


3 ログアウト



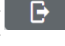




- 1 TSO Comp. ポータル機能へログインする
トップ画面が表示されます。
- 2 画面右上の[]アイコンをクリックする
ログイン画面が表示されます。

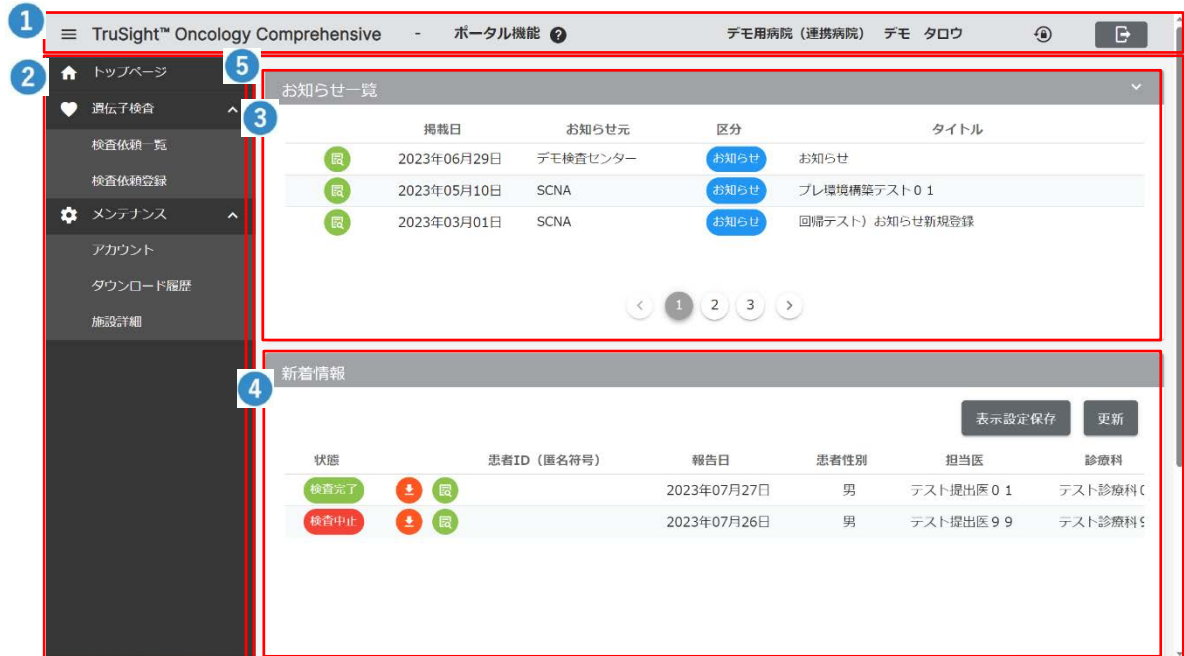4 トップ画面

トップ画面は以下で構成されています。



No	項目名	説明
①	メニューバー	すべての画面に表示します。
	[≡]アイコン	ナビゲーションバーの表示を切り替えます（拡大/縮小）。
	[?]アイコン	TSO Comp. ポータル機能の操作マニュアルを表示します。
	[氏名]	ログインされているかたの氏名を表示します。
	[🔒]アイコン	パスワード変更画面を表示します。
	[🏠]アイコン	TSO Comp. ポータル機能からログアウトします。
②	ナビゲーションバー	すべての画面に表示します。
	[トップページ]	クリックするとトップページへジャンプします。
	[遺伝子検査]	遺伝子検査依頼の登録・検索に関する機能群です。
	[検査依頼一覧]	検査依頼の検索結果を一覧表示します。
	[検査依頼登録]	検査依頼の登録をおこないます。
	[メンテナンス]	各種情報の管理をおこなう機能群です。
	[アカウント]	アカウントの情報の操作をおこないます。

No	項目名	説明
	[ダウンロード履歴]	ダウンロード履歴の検索・閲覧をおこないます。
	[施設詳細]	検査ステータス通知メールを受け取るメールアドレスを登録します。
③	お知らせ一覧	お知らせ一覧を表示します。
	[ ]アイコン	お知らせ一覧エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[]アイコン	お知らせの詳細を表示します。
④	新着情報	検査依頼情報の新着情報を表示します。
	[]アイコン	検査結果レポートを一括でダウンロードします。
	[]アイコン	検査依頼情報の詳細を表示します。
	[表示設定保存]ボタン	表示されているタブの並び順を保存します。
	[更新]ボタン	新着情報を更新します。
⑤	コンテンツ	ナビゲーションバーから選択した機能を表示します。 通常業務はこちらのエリアで操作します。

4.2 パスワードを変更／初期化する

1 パスワードの変更



- 1 TSO Comp. ポータル機能へログインする
トップ画面が表示されます。
- 2 画面右上の[🔒]アイコンをクリックする
パスワード変更画面が表示されます。

パスワード変更

新しいパスワードを設定してください
新しいパスワードは8文字以上20文字以内で、英字(大文字/小文字)・記号・数字を含む必要があります

現在のパスワード *

新しいパスワード *

確認用パスワード *

変更 キャンセル

- 3 パスワード変更に必要な情報（[現在のパスワード][新しいパスワード][確認用パスワード]）を入力し、[変更]ボタンをクリックする
確認メッセージが表示されます。

実行確認

パスワード変更します
よろしいですか?

はい いいえ

- 4 [はい]（変更しない場合は[いいえ]）ボタンをクリックする

パスワード変更完了のメッセージが表示されます。




- 5 [OK]ボタンをクリックする

2 パスワード初期化


- 1 ブラウザを起動して、TSO Comp. ポータル機能へアクセスする
ログイン画面が表示されます。




- 2 [パスワードの初期化]ボタンをクリックする
パスワード再発行画面が表示されます。

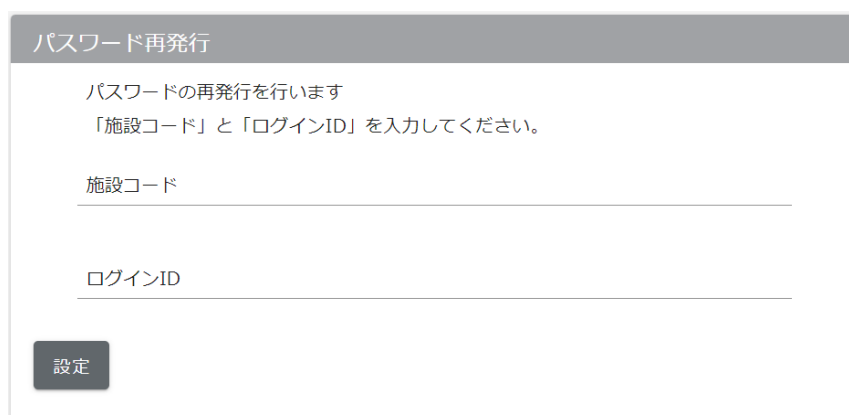

- 3 パスワードを初期化するアカウントの情報（[施設コード][ログイン ID]）を入力し、[設定]ボタンをクリックする
確認メッセージが表示されます。

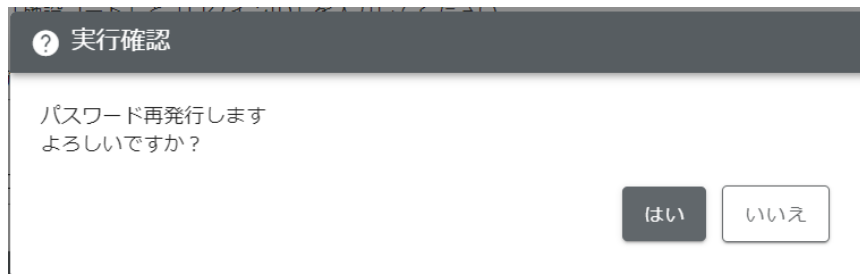


- 4 [はい]（パスワードを再発行しない場合は[いいえ]）ボタンをクリックする
パスワード初期化完了のメッセージが表示されます。

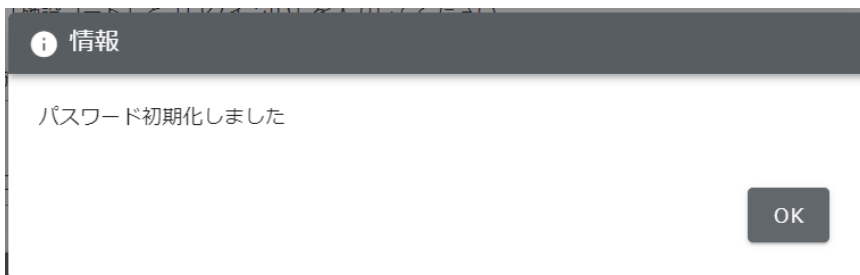


- 5 [OK]ボタンをクリックする
再度ログイン画面が表示されます。

アカウント情報に登録されているメールアドレス宛てに[TSO Comp.ポータル パスワード初期化のお知らせ(自動配信)]が送信されるので、記載されているログイン情報でログイン処理をおこないます。

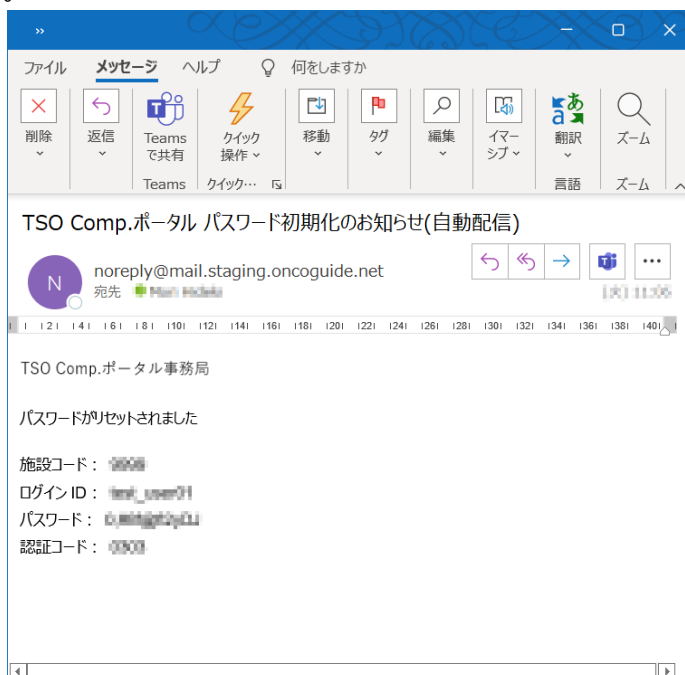


- 6 TSO Comp.ポータル パスワード初期化のお知らせ(自動配信)メールに記載の [施設コード]、[ログイン ID]、[パスワード]を入力し、[ログイン]ボタンをクリックする

パスワード再設定画面が表示されます。



The screenshot shows a web form titled "パスワード再設定" (Reset Password). The form contains the following text: "パスワードの再設定を行います" (We will reset your password), "メール送信された「認証コード」と「新しいパスワード」を入力してください。" (Please enter the authentication code and new password sent by email.), and "新しいパスワードは8文字以上20文字以内で、英字(大文字/小文字)・記号・数字を含む必要があります。" (The new password must be 8-20 characters long and contain letters, symbols, and numbers). There are two input fields: "認証コード" (Authentication Code) and "パスワード" (Password). A "設定" (Settings) button is located at the bottom left.

- 7 TSO Comp.ポータル パスワード初期化のお知らせ(自動配信) メールに記載の [認証コード]、[(新しい) パスワード]を入力し、[設定]ボタンをクリックする
確認メッセージが表示されます。



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "実行確認" (Execution Confirmation). The text inside says: "パスワード設定します よろしいですか?" (Do you want to set the password?). There are two buttons: "はい" (Yes) and "いいえ" (No).

- 8 [はい] (設定しない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
パスワード変更完了のメッセージが表示されます。




The screenshot shows an information message box titled "情報" (Information). The text says: "パスワード変更しました" (Password has been changed). There is an "OK" button at the bottom right.

- 9 [OK]ボタンをクリックする
再度ログイン画面が表示されます。

4.3 お知らせを閲覧する

1 お知らせの閲覧

お知らせ一覧				
	掲載日	お知らせ元	区分	タイトル
	2022年08月01日	SCNA		システムメンテナンスの実施連絡
	2022年02月01日	検査ラボ9 5 1 0		タイトル
	2021年12月27日	検査ラボ9 5 1		TTTTTTTT

- 1 トップページ「お知らせ一覧」から、閲覧したいお知らせの「」アイコンをクリックする
お知らせ詳細画面が表示されます。

システムメンテナンスの実施連絡

 2022年08月01日
SCNA

TruSight™Oncology Comprehensive ポータル機能の機能追加・変更のため、以下の日程でメンテナンス作業を行います。
メンテナンス日時：20XX/XX/XX AM7:00 ~ AM8:00
20XX/XX/XX AM7:00 ~ AM8:00
※サービス再開後は「Ctrl」+「F5」キーでブラウザのキャッシュをクリアしてからご利用ください。

関連情報
<https://www.sysmex.co.jp/>

添付ファイル
 [Report_FileNames.pdf](#)




- 2 必要に応じて[関連情報]または[添付ファイル]のリンクをクリックし、各種情報を参照します。
 - ※ 1. 関連情報 : URL のページに移動します。
 - ※ 2. 添付ファイル : ファイルのダウンロード

4.4 検査依頼の新着情報を閲覧する

1 新着情報の閲覧

新着情報									
状態	報告日	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID	C-CAT登録ID	C-CAT検体識別番号	患者性別		
検査完了	2023年07月27日	テスト提出医 0 1	テスト診療科 0 1	p1	r1	s1	男		
検査完了	2023年09月28日	テスト提出医 0 1	テスト診療科 0 2	20230929ID1	2023092901	20230929NO1	男		
検査中止	2023年09月28日	テスト提出医 0 1	テスト診療科 0 3	20230929ID2	2023092902	20230929NO2	女		
一時停止	2023年09月28日	テスト提出医 0 3	テスト診療科 0 3	20230929ID3	2023092903	20230929NO3	男		
検査完了	2023年09月22日	提出医 9 9	診療科 9 9	1111111111111111	2222222222	33333333333333333333	男		
検査完了	2023年09月21日	テスト担当医 0 1	テスト診療科 0 1	1	1	1	男		
検査中止	2023年08月25日	テスト提出医 9 9	テスト診療科 9 9	p99	r99	s99	男		
検査完了	2023年09月25日	テスト提出医	テスト腫瘍内科	p202308250001	r20230825t	p20230825999900000001	男		
検査中止	2023年09月27日	テスト	テスト	53252324234	53252324324	5325232432423	男		
一時停止	2023年09月27日	テスト担当医 1	テスト診療科 1	p1	r1	s1	男		

- 1 トップページ「新着情報」エリアから、閲覧したい検査依頼の「」アイコンをクリックする

検査詳細画面へ遷移します。

検査詳細				バージョンNo: 1
検査依頼情報				
施設コード	中坂/拠点病院	デモ用病院 (中核病院)		
検査センター	デモ検査センター	検査依頼ID	0000000042282	
パネル種類	TSO Comp. パネルシステム	診療科	テスト診療科 0 1	
入院・外来	入院	提出医	テスト提出医 0 1	
患者さんの同意	同意済み	パネルシステム利用の同意	同意済み	
注意事項の同意	同意済み	C-CAT提出	同意済み	
ゲノムデータ2次利用	同意済み			
C-CAT患者識別ID	p1	C-CAT登録ID	r1	
検体識別番号	s1			

個別ダウンロード

検査完了レポート

報告書種別	区分	ファイル名	登録日時
シーケンスレポート	ファイル	RG_SequencingReport_1234567890123456	2022/12/19 06:05:11

個別ダウンロード

レポート一括ダウンロード

戻る

変更履歴

- 2 検査詳細画面の中央下にある[戻る]をクリックする

トップ画面に遷移します。

2 変更履歴の閲覧

- 1 検査詳細画面の右下にある[変更履歴]ボタンをクリックする
変更履歴画面を開きます。

変更履歴登録日時	履歴種別	検査依頼病院	中核/拠点病院	検査センター	状態	検索性ID	診療科	入院・外来	提出医	患者の 同意
2023/07/28 10:27:00	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/28 10:26:45	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査中		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:32:57	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:32:50	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査中		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:30:20	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:30:12	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査中		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:28:05	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:27:51	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査中		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/06/30 15:45:46	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み

✕ 閉じる

- 2 [閉じる]ボタンをクリックする
変更履歴画面を閉じます。

3 検査詳細画面

検査詳細画面は、以下で構成されています。

検査詳細バージョンNo: 16

1 検査依頼情報▼

施設コード	99991111	中核/拠点病院	デモ用病院 (中核病院)
検査センター	デモ検査センター	検査依頼ID	0000000042442
パネル種類	TSO Comp. パネルシステム	診療科	1 q あ z ! Q A Z
入院・外来	入院	提出医	1 q あ z ! Q A Z
患者さんの同意	同意済み	C-CAT提出同意	同意済み
ゲノムデータ2次利用の同意	同意済み	イルミナへのデータ提供同意	同意済み
注意事項の同意	同意済み		
C-CAT患者識別ID	333333333333	C-CAT登録ID	3333333333
検体識別番号	333333333333333333		

2 患者情報▼

その他No (匿名化ID)		性別	男
年齢	100歳		

3 検査情報▼

検査状態	検査完了		
受付日	2023年06月30日		
受付コメント	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>		
検査開始日	2023年06月30日	検査完了日	2023年07月27日
一時停止日1	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>		
一時停止理由1	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>		
一時停止日2	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>		
一時停止理由2	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>		
検査中止日	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>		
中止理由	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>		

4 検体情報

依頼日	2023年08月03日	HE染色スライド数	2枚
未染色スライド	11 μm厚 6枚	マクロダイセクション	必要
腫瘍細胞率	31(%)	腫瘍検体採取日	2023年08月03日
がん種	Solid tumor High-grade undifferentiated pleomorphic sarco	Bone cancer	Sarcoma of bone
採取部位	テスト	移植歴	あり
検査センター受付日		検体管理ID1	
検体管理ID2		検体管理ID3	
検体管理ID4		検体管理ID5	

5 検査結果レポート

一時停止レポート

報告書種別	区分	ファイル名	登録日時
対象データがありません。			

個別ダウンロード

検査中止レポート

報告書種別	区分	ファイル名	登録日時
対象データがありません。			

個別ダウンロード

検査完了レポート





報告書種別	区分	ファイル名	登録日時
対象データがありません。			
シーケンスレポート	ファイル	sequencing_report_12345678901234567890_S	2023/06/30 15:45:34
検査結果通知書	ファイル	cover_letter.pdf	2023/06/30 15:44:02



個別ダウンロード

レポート一括ダウンロード

レポート一括ダウンロード

No	項目名	説明
①	検査依頼情報	検査依頼の情報を表示するエリアです。
	[<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/>]アイコン	検索依頼情報エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[施設コード]	出検先の検査センターが管理する施設コードを表示します。
	[中核/拠点病院]	依頼元病院が連携している中核/拠点病院名を表示します。
	[検査センター]	出検する検査センター名を表示します。


No	項目名	説明
	[検査依頼 ID]	システム内で一意となる検査依頼 ID を表示します。
	[パネル種別]	パネル種別名[TSO Comp パネルシステム]を表示します。
	[診療科]	検査を依頼する診療科を表示します。
	[入院・外来]	検査依頼の患者の入院・外来区分を表示します。
	[提出医]	検査を依頼する医師名を表示します。
	[患者さんの同意]	検査の目的や限界、検査の意義を説明し同意を得ているかどうかを表示します。
	[C-CAT 提出同意]	検査結果の C-CAT への提出について同意されているかどうかを表示します。
	[ゲノムデータ 2 次利用の同意]	C-CAT へ提供された情報やゲノムデータなどの第三者提供について同意されているかどうかを表示します。
	[イルミナへのデータ提供同意]	製造販売業者へのゲノムデータの開示や利用について同意されているかどうかを表示します。
	[注意事項の同意]	承認を受けた検査項目以外の検査結果を解析レポートに表示することについて同意を得ているかを選択します。
	[C-CAT 患者識別 ID]	検査依頼の C-CAT 患者識別 ID を表示します。
	[C-CAT 登録 ID]	検査依頼の C-CAT 登録 ID を表示します。
	[検体識別番号]	検査依頼の検体識別番号を表示します。
②	患者情報	検査依頼の患者情報を表示するエリアです。
	[ ]アイコン	患者依頼情報エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[その他 No（匿名化 ID）]	検査依頼の患者のその他 No（匿名化 ID）を表示します。
	[性別]	検査依頼の患者の性別を表示します。
	[年齢]	検査依頼の患者の年齢を表示します。
③	検査情報	検査情報を表示するエリアです。
	[ ]アイコン	検査情報エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[検査状態]	検査依頼の進捗状態を表示します。
	[受付日]	検査依頼の受付日を表示します。
	[受付コメント]	検査依頼の受付コメントを表示します。
	[検査開始日]	検査の開始日を表示します。
	[検査完了日]	検査の完了日を表示します。

No	項目名	説明
	[一時停止日 1]	検査が一時停止された日付を表示します。(1回目)
	[一時停止理由 1]	検査が一時停止された理由を表示します。(1回目)
	[一時停止日 2]	検査が一時停止された日付を表示します。(2回目)
	[一時停止理由 2]	検査が一時停止された理由を表示します。(2回目)
	[検査中止日]	検査が中止された日付を表示します。
	[中止理由]	検査が中止された理由を表示します。
④	検体情報	検体の情報を表示するエリアです。
	[ ]アイコン	検体依頼情報エリアの表示を切り替えます(表示/非表示)。
	[依頼日]	検体を提出(依頼)した日付を表示します。
	[HE 染色スライド枚数]	HE 染色スライド枚数を表示します。
	[未染色スライド]	未染色スライドの厚みと枚数を表示します。
	[マクロダイセクション]	検体のマクロダイセクションが必要かどうかを表示します。
	[腫瘍細胞率]	腫瘍細胞の含有率を表示します。
	[検体採取日]	検体採取日を表示します。
	[がん種]	検査依頼の患者のがん種を表示します。
	[採取部位]	検査依頼の検体の採取部位を表示します。
	[移植歴]	検査依頼の患者の移植(同種造血幹細胞・臓器移植)歴の有無を表示します。
	[検査センター受付日]	検査センターの検査依頼受付日を表示します。
	[検体管理 ID1~ID5]	検査を依頼された検査センターが管理する検体管理 ID を表示します。
⑤	検査結果レポート	検査結果レポート(一時停止・中止・完了)などの情報を表示するエリアです。
	[個別ダウンロード]ボタン	選択した検査結果レポートを個別でダウンロードします。
	[変更履歴]ボタン	検査依頼の変更履歴を参照します。
	[レポート一括ダウンロード]ボタン	検査結果レポートを一括でダウンロードします。
	[戻る]ボタン	トップ画面に遷移します。

4.5 検査依頼の新着情報から検査レポートをダウンロードする

1 新着情報一覧からの検査レポートの一括ダウンロード

報告日	状態	その他No. (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID	C-CAT登録ID	C-CAT検体識別番号
2026年03月11日	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334	111	222
2026年03月11日	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667	111	222


- 1 トップページ「新着情報」エリアから、検査結果レポートをダウンロードしたい検査依頼を選択し「」アイコンをクリックする
確認メッセージが表示されます。



- 2 [はい] (ダウンロードをしない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
選択した症例情報の検査レポートを ZIP ファイル形式でダウンロードします。

2 検査詳細画面からの検査レポートの一括ダウンロード

新着情報									表示設定保存	更新
報告日	状態	その他No (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID	C-CAT登録ID	C-CAT検体識別番号		
2026年03月11日	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334	111	222		
2026年03月11日	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667	111	222		

- 1 トップページ「新着情報」エリアから、閲覧したい検査依頼の「」アイコンをクリックする
検査詳細画面へ遷移します。

検査詳細				バージョンNo: 3
検査依頼新情報				
施設コード	中核/拠点病院	拠点病院		
検査センター	検査センター	検査依頼ID	TT000000000002	
パネル種類	TSO Comp. パネルシステム	診療科	テスト科	
入院・外来	入院	病棟		
階数		提出医	テスト医	
患者さんの同意	同意済み	C-CAT提出同意	同意済み	
ケムデータ2次利用の同意	同意済み	イルミナへのデータ提供同意	同意済み	
注意事項の同意	同意済み			
C-CAT患者識別ID	1111222233334	C-CAT登録ID	111	
C-CAT検体識別番号	222			
コメント/備考				
検査中止レポート				
報告書種別	区分	ファイル名	登録日時	
QCレポート	ファイル	検査中止.pdf	2026/03/12 11:55:08	
検査結果通知書	ファイル	検査結果通知書.pdf	2026/03/12 11:55:08	
一括ダウンロード				
検査完了レポート				
報告書種別	区分	ファイル名	登録日時	
対象データがありません。				
一括ダウンロード				
レポート一括ダウンロード				
戻る				
変更履歴				

- 2 検査詳細画面の中央下にある[レポート一括ダウンロード]ボタンをクリックする


確認メッセージが表示されます。



- 3 [はい] (ダウンロードしない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
症例情報の検査レポートを ZIP ファイル形式でダウンロードします。

3 検査レポートの個別ダウンロード

新着情報									表示設定保存	更新
報告日	状態	その他No (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID	C-CAT登録ID	C-CAT検体識別番号		
2026年03月11日	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334	111	222		
2026年03月11日	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667	111	222		

- 1 トップページ「新着情報」エリアから、閲覧したい検査依頼の「」アイコンをクリックする
検査詳細画面へ遷移します。

検査詳細				バージョンNo: 3
検査依頼情報				
施設コード		中核/拠点病院	拠点病院	
検査センター	検査センター	検査依頼ID	TT00000000002	
パネル種類	TSO Comp. パネルシステム	診療科	テスト科	
入院・外来	入院	病棟		
階数		提出医	テスト医	
患者さんの同意	同意済み	C-CAT提出同意	同意済み	
ゲノムデータ2次利用の同意	同意済み	イルミナへのデータ提供同意	同意済み	
注意事項の同意	同意済み			
C-CAT患者識別ID	1111222233334	C-CAT登録ID	111	
C-CAT検体識別番号	222			
コメント/備考				

検査中止レポート			
報告書種別	区分	ファイル名	登録日時
QCレポート	ファイル	検査中止.pdf	2026/03/12 11:55:08
検査結果通知書	ファイル	検査結果通知書.pdf	2026/03/12 11:55:08

検査完了レポート			
報告書種別	区分	ファイル名	登録日時
対象データがありません。			

- 2 検査詳細画面の検査結果レポートエリアからダウンロードする検査レポートを選択し、[個別ダウンロード]ボタンをクリックする
確認メッセージが表示されます。



- 3 [はい] (ダウンロードしない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
選択した検査レポートファイルをダウンロードします。

4.6 検査依頼を登録する

1 検査依頼の登録

- 1 ナビゲーションバーの[検査依頼登録]をクリックする
検査依頼登録画面が表示されます。

- 2 検査依頼情報（検査依頼情報[中核／拠点病院][検査センター][診療科][入院・外来][提出医][患者さんの同意][C-CAT 提出同意][ゲノムデータ 2 次利用の同意][イルミナへのデータ提供同意][注意事項の同意][C-CAT 患者識別 ID][C-CAT 登録 ID][検体識別番号]）を入力する
- 3 患者情報（[その他 No(匿名化 ID)][性別][年齢]）を入力する
- 4 検体情報（[依頼日][未染色スライド（厚さ・枚数）][マクロダイセクション][腫瘍細胞率][検体採取日][がん種][採取部位][移植歴]）を入力する
- 5 [検査依頼]ボタンをクリックする
確認メッセージが表示されます。

※ 1. [検査の同意]がない場合は検査依頼を登録することができません。

※ 2. [腫瘍含有率]が 20%未満で[検査の実施]に同意が無い場合は検査依頼を登録することができません。

※ 3. 検査依頼申込書を出力する場合は[検査依頼申込書を出力する]にチェックした状態で以下の操作をおこなってください。

チェックがない場合でも検索結果（検査依頼）一覧から出力することができます。

実行確認

「腫瘍細胞含有率が20%未満」の場合、凍結細胞ドライバースペックを抽出できない可能性があります。上記をご理解頂いたうえで検査を依頼される場合は、以下の両方をチェックしてください。

腫瘍含有率が20%未満だが検査を実施することに同意する

検査依頼を行います
よろしいですか？

検査依頼申込書を出力する

検査依頼情報

施設コード		中核/拠点病院	中核病院
検査センター	検査センター_試験用	検査依頼ID	
パネル種類	T50 Comp. パネルシステム	検査科	テスト腫瘍内科
入院・外来	未選択	提出票	提出票 1
患者さんの同意	同意済み	パネルシステム利用の同意	同意済み
C-CAT提出	同意済み	ゲノムデータ2次利用	同意済み
C-CAT患者識別ID	1561561616156	C-CAT登録ID	1561561615
検体識別番号	5615615615616		

患者情報

その他No (匿名化ID)	12345	性別	女
生年月日	2020年03月01日		

検体情報

依頼日	2026年03月12日	HE染色スライド数	1枚
未染色スライド	9 μm厚 8 枚	スライドケース数	6
マクロダイセクション	必要	腫瘍細胞率	55(%)
検体採取日	2026年03月12日		
がん種	Solid tumor	Thyroid carcinoma	
移植歴	移植歴なし		

はい いいえ

6 [はい]（登録しない場合は[いいえ]）ボタンをクリックする
依頼登録完了のメッセージが表示されます。

情報

検査依頼が完了しました

OK

7 [OK]ボタンをクリックする
検査依頼一覧画面へ遷移します。

2 検査依頼登録（編集）画面

検査依頼登録画面は、以下のように構成されています。

検査依頼詳細 バージョンNo: 1

※文字は必須です。

1 検査依頼情報

施設コード

検査依頼病院 903 連携病院

中核/拠点病院 * 中核病院

成人、小児がんの連携先の病院が異なる場合は選択してください。

検査センター * 検査センター_試験用

検査依頼ID

パネル種類 TSO Comp. パネルシステム

診療科 *

入院・外来 * 未選択 入院 外来

提出医 *

患者さんの同意

1. TSO Comp. 検査の目的や限界、検査の意義を担当医師が患者さんに説明し、患者さんの文書による同意を得ている。 はい いいえ

2. 患者さんを直接特定できない形にした情報やゲノムデータ等をC-CAT（がんゲノム情報管理センター）へ提供する同意を得ている。 はい いいえ

3. C-CATへ提供された情報やゲノムデータ等を、学術研究や医薬品等の開発目的での利用を希望する第三者に提供する同意を得ている。 はい いいえ

4. 本検査の改善や調査を目的として、衛生検査所から製造販売業者のイルミナ(株)へゲノムデータを開示・利用することについて同意を得ている。 はい いいえ

注意事項 *

承認を受けた検査項目*以外の検査結果を最終報告書に表示することについて
* 本邦で承認を受けた検査項目の内訳（解析対象遺伝子及び遺伝子変異タイプ）については、最新の添付文書をご確認ください。 同意します。（必須）

C-CAT患者識別ID *

C-CATへ登録しない場合は、任意の番号を13桁の数字で入力してください。

C-CAT登録ID *

検体識別番号 *

2 患者情報

その他No（匿名化ID） *

性別 *

年齢 * 歳

3

検体情報

依頼日* 2026年03月12日 Total

HE染色スライド枚数 1 枚

未染色スライド* μm厚 枚

スライドケース数*

1枚のスライドは複数の切手を載せる場合、未染色スライドと両側のHEスライドを提出いただく
同一材料ブロックから作製した切片、または同一部位・同一のタイミングで採取された複数ブロックから作製した切片

マクロデザイン* 必要 不要

腫瘍細胞率 (0-100のパーセンテージで入力してください。)%

マクロデザインが【不要】な場合は、全体にわたる腫瘍細胞含有率を記載してください
マクロデザインが【必要】な場合は、必ずHE染色スライドの表裏から腫瘍部に輪状ペン等で
マーキングを行い、マーキング内の腫瘍細胞含有率を記載してください。





検体採取日* 年/月/日 Total

がん種*

病理部* なし あり

腫瘍修飾または病理検査科病理修飾部のみ/ありを選択してください。

No	項目名	説明
①	検査依頼情報	検査依頼情報を入力するエリアです。
	[<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="^"/>]アイコン	検査依頼情報エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[施設コード]	出検先の検査センターが管理する施設コードを表示します。
	[検査依頼病院]	検査依頼病院の施設コードと施設名を表示します。
	[中核/拠点病院]	依頼元病院が連携している中核/拠点病院名を表示します。 ※連携先の中核/拠点病院が複数存在する場合は、依頼する中核/拠点病院を指定します。
	[検査センター]	出検する検査センター名を表示します。 ※検査センターの変更予定がある場合は、依頼日の時点で契約中の検査センターを指定します。
	[検査依頼 ID]	システム内で一意となる検査依頼 ID を表示します。
	[パネル種別]	パネル種別名[TSO Comp パネルシステム]を表示します。
	[診療科]	検査を依頼する診療科を入力します。
	[入院・外来]	検査依頼の患者の入院・外来区分（未選択・入院・外来）を選択します。
	[提出医]	検査を依頼する医師名を入力します。
	[患者さんの同意]	検査の目的や限界、検査の意義を説明し同意を得ているかどうかを選択します。
	[C-CAT 提出同意]	検査結果の C-CAT への提出について同意を得ているかどうかを選択します。

No	項目名	説明
	[ゲノムデータ 2 次利用の同意]	C-CAT へ提供された情報やゲノムデータなどの第三者提供について同意を得ているかどうか選択します。
	[イルミナへのデータ提供同意]	製造販売業者へのゲノムデータの開示や利用について同意を得ているかどうかを選択します。
	[注意事項の同意]	承認を受けた検査項目以外の検査結果を解析レポートに表示することについて同意を得ているかを選択します。 ※検査依頼の登録に本項目の同意は必須です。
	[C-CAT 患者識別 ID]	検査依頼の C-CAT 患者識別 ID を入力します。
	[C-CAT 登録 ID]	検査依頼の C-CAT 登録 ID を入力します。
	[検体識別番号]	検査依頼の検体識別番号を入力します。
②	患者情報	検査依頼の患者情報を入力するエリアです。
	[ ]アイコン	患者情報エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[その他 No（匿名化 ID）]	検査依頼の患者のその他 No（匿名化 ID）を入力します。
	[性別]	検査依頼の患者の性別（男・女）を選択します。
	[年齢]	検査依頼の患者の年齢を入力します。
③	検体情報	検査依頼の検体情報を入力するエリアです。
	[ ]アイコン	検体情報エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[依頼日]	検体を提出（依頼）する日付を入力します。
	[HE 染色スライド枚数]	HE 染色スライド枚数を入力します。
	[未染色スライド]	未染色スライドの厚みと枚数を入力します。
	[マクロダイセクション]	検体のマクロダイセクションが必要かどうかを選択します。
	[腫瘍細胞率]	腫瘍細胞の含有率を入力します。
	[検体採取日]	腫瘍検体採取日を入力します。
	[がん種]	検査依頼の患者のがん種を入力します。
	[移植歴]	検査依頼の患者の移植（同種造血幹細胞・臓器移植）歴を選択します。
	[更新]ボタン	一時保存した依頼を編集したあと、検査依頼をおこないます。
	[検査依頼]ボタン	入力された情報で、検査依頼登録をおこないます。

No	項目名	説明
	[訂正]ボタン	入力された情報で、訂正登録をおこないます。
	[一時保存]ボタン	入力された情報を一時保存します。
	[戻る]ボタン	検査依頼一覧画面に遷移します。

4.7 検査依頼情報を検索／編集／出力する

1 検査依頼の検索

- 1 ナビゲーションバーの[検査依頼一覧]をクリックする
検査依頼検索画面が表示されます。

検索条件

検査依頼日 2025年12月12日 ~ 2026年03月12日

その他No (匿名化ID) 担当医

C-CAT登録ID C-CAT検体識別番号 C-CAT患者識別ID

ステータス 依頼前 依頼済 受付済 検体処理中 一時停止 検査中 検査中止 検査完了 訂正

検索結果

	依頼日	検査依頼ID	検査の状態	その他No (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID
	2026年03月12日	TT000000000005	依頼済	777	男	テスト医	テスト科	123456789101
	2026年03月12日	TT000000000004	依頼前					
	2026年03月12日	TT000000000003	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667
	2026年03月12日	TT000000000002	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334

- 2 検索条件を入力し、[検索]ボタンをクリックする
検索条件に一致する検査依頼が、検索結果に表示されます。

2 検査依頼情報の編集

- 1 ナビゲーションバーの[検査依頼一覧]をクリックする
検査依頼検索画面が表示されます。

検索条件

検査依頼日 2025年12月12日 ~ 2026年03月12日

その他No (匿名化ID) 担当医

C-CAT登録ID C-CAT検体識別番号 C-CAT患者識別ID

ステータス 依頼前 依頼済 受付済 検体処理中 一時停止 検査中 検査中止 検査完了 訂正

検索 クリア

検索結果

表示修正保存

	依頼日	検査依頼ID	検査の状態	その他No (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID
	2026年03月12日	TT000000000005	依頼済	777	男	テスト医	テスト科	123456789101
	2026年03月12日	TT000000000004	依頼前					
	2026年03月12日	TT000000000003	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667
	2026年03月12日	TT000000000002	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334

CSVダウンロード

- 2 検索条件を入力し、[検索]ボタンをクリックする
検索条件に一致する検査依頼が、検索結果に表示されます。
- 3 検索結果一覧から編集する検査依頼情報の[]アイコンをクリックする
検査依頼編集画面へ遷移します。

検査依頼詳細 バージョンNo: 1

赤字は必須です。

検査依頼情報

施設コード _____

検査依頼病院 9999 デモ用病院（連携病院）

中核/拠点病院 * 9996 Q デモ用病院（中核病院）

成人、小児がんの連携先の病院が異なる場合は選択してください。

検査センター * 9997 Q デモ検査センター

検査依頼ID _____

パネル種類 TSO Comp. パネルシステム

診療科 * _____

入院・外来 未選択 入院 外来

提出医 * _____

スライドケース数 * _____

1枚のスライドに複数の切片を載せる場合、染染スライドと同様のHEスライドを提出いただく
同一FFPEブロックから作製した切片、または同一部位・同一タイミングで採取された複数ブロックから作製した切片

マクロダイセクション * 必要 不要

腫瘍細胞率 (0-100のパーセンテージで入力してください。)* _____ %

マクロダイセクションが【 不要 】な場合は、全体に占める腫瘍細胞含有率を記載してください
マクロダイセクションが【 必要 】な場合は、必ずHE染色スライドの裏面から腫瘍部に油性ペン等で
マーキングを行い、マーキング内の腫瘍細胞含有率を記載してください。

検体採取日 * 年/月/日

がん種 * _____

移植歴 * なし あり

腫瘍移植歴または同種造血幹細胞移植歴のなし/ありを選択してください。

4 依頼内容を訂正し、画面中央下にある[訂正]ボタンをクリックする

確認メッセージが表示されます。

※ 1. [検査の同意]がない場合は検査依頼を登録することができません。

※ 2. [腫瘍含有率]が 20%未満で[検査の実施]に同意が無い場合は検査依頼を登録することができません。

※ 3. 検査依頼申込書を出力する場合は[検査依頼申込書を出力する]にチェックした状態で以下の操作をおこなってください。

チェックがない場合でも検索結果（検査依頼）一覧から出力することができます。

実行確認

更新を行います
よろしいですか？

検査依頼情報

施設コード		申込/宛先病院	申込病院
検査センター	検査センター	検査依頼ID	TT000000000005
パネル種類	TSO Comp./J(ネルスシステム)	診療科	テスト科
入院・外来	来歴訳	提出医	テスト医
患者さんの同意	同意済み	C-CAT提出同意	同意済み
ゲノムデータ2次利用の同意	同意済み	イルミナへのデータ提供同意	同意済み
C-CAT患者識別ID	123456789101	C-CAT登録ID	999
C-CAT検体識別番号	888		

患者情報

その他No.(匿名化ID)	777	性別	男
生年月日	2019年03月04日		

検体情報

依頼日	2026年03月12日	HE染色スライド数	1枚
非染色スライド	2 µm厚 3 枚	スライドケース数	4

はい いいえ

- 5 [はい]（更新しない場合は[いいえ]）ボタンをクリックする
検査依頼更新完了のメッセージが表示されます。



- 6 [OK]ボタンをクリックする
検査依頼一覧画面へ遷移します。
※検査センターおよび遺伝子ラボへ、訂正通知メールが送信されます。

3 検査依頼情報のファイル出力

- 1 ナビゲーションバーの[検査依頼一覧]をクリックする
検査依頼検索画面が表示されます。

検索条件

検査依頼日 2025年12月12日 ~ 2026年03月12日

その他No (匿名化ID) 担当医

C-CAT登録ID C-CAT検体識別番号 C-CAT患者識別ID

ステータス 依頼前 依頼済 受付済 検体処理中 一時停止 検査中 検査中止 検査完了 訂正

検索 クリア

検索結果

表示設定保存

	依頼日	検査依頼ID	検査の状態	その他No (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2026年03月12日	TT00000000005	依頼済	777	男	テスト医	テスト科	123456789101
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2026年03月12日	TT00000000004	依頼前					
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2026年03月12日	TT00000000003	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2026年03月12日	TT00000000002	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334

CSVダウンロード

- 2 検索条件を入力し、[検索]ボタンをクリックする
検索条件に一致する検査依頼が、検索結果に表示されます。
- 3 検索結果一覧からファイル出力する検査依頼情報の左端のチェックボックスに
チェックを入れ、[CSVダウンロード]ボタンをクリックする
確認メッセージが表示されます。

? CSVダウンロード

CSVをダウンロードします
よろしいですか?

はい いいえ

- 4 [はい] (ダウンロードしない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
検索結果一覧の内容をCSVファイル形式でダウンロードします。

4 検査依頼申込書の印刷

- 1 ナビゲーションバーの[検査依頼一覧]をクリックする
検査依頼検索画面が表示されます。

検索条件

検査依頼日 2025年12月12日 ~ 2026年03月12日

その他No (匿名化ID) 担当医

C-CAT登録ID C-CAT検体識別番号 C-CAT患者識別ID

ステータス 依頼前 依頼済 受付済 検体処理中 一時停止 検査中 検査中止 検査完了 訂正

検索 クリア

検索結果

表示設定保存

	依頼日	検査依頼ID	検査の状態	その他No (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID
	2026年03月12日	TT000000000005	依頼済	777	男	テスト医	テスト科	123456789101
	2026年03月12日	TT000000000004	依頼前					
	2026年03月12日	TT000000000003	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667
	2026年03月12日	TT000000000002	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334

CSVダウンロード

- 2 検索条件を入力し、[検索]ボタンをクリックする
検索条件に一致する検査依頼が、検索結果に表示されます。
- 3 検索結果一覧から検査依頼申込書を印刷する検査依頼情報の[]アイコンをクリックする
確認メッセージが表示されます。

? 実行確認

検査依頼申込書を出力します。
よろしいですか?

はい いいえ

- 4 [はい] (出力しない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
別タブが開き印刷イメージが出力されます。
ブラウザの印刷機能にて印刷をおこなってください。

TSO Comp. パネルシステム専用依頼書
病院控え①



TT00000000042

RF-IDラベル貼り付け位置

病院コード	903		
病院名	中核病院		
氏名 (C-CAT識別患者ID)	AA0000000001		
その他No (匿名化ID)	0001		
提出医	テスト		
検査依頼項目	OT12-3 TSO Comp. パネルシステム		
項目数	1		
検体数			
材料			
CMコード			
請求区分	10・20・30		
性別	男性		
依頼日	2024/02/14		
検体採取日	2024/02/14		
	採取時刻		

C-CAT登録ID	AA00000001	U-KEY (検体識別番号)	BB0001
年齢	30歳	緊急時連絡先	
入院/外来	未選択	診療科	テスト

HE染色スライド 1 枚
未染色スライド
2 μm厚 5 枚

マクローダイセクションが【不要】な場合は、全体に占める腫瘍細胞含有率を記載してください。
マクローダイセクションが【必要】な場合は、HE染色スライドの裏面から腫瘍部に必ず油性ペン等でマーキングを行い、マーキング内の腫瘍細胞含有率を記載してください。
マクローダイセクション 必要 腫瘍細胞含有率 50 %

がん種	Solid tumor; Adrenal cancer; Tumor of adrenal cortex; Adrenal cortex carcinoma		
採取部位	テスト	移植歴	なし

- インフォームドコンセント
- TSO Comp. 検査の目的や流れ、検査の意義を知り医師が説明し、検査後の文書による同意を得ている。
 - 検査結果を直接待たせない形にした情報やゲノムデータ等をC-CAT (がんゲノム情報管理センター) へ提供する同意を得ている。
 - C-CATへ提供された情報やゲノムデータ等を、学術研究や医薬品等の開発目的での利用を希望する第三者に提供する同意を得ている。
 - 本検査の改善や調査を目的として、衛生検査所から製造販売業者のイルミナ(株)へゲノムデータを開示・利用することについて同意を得ている。

受検者		確認者	
-----	--	-----	--

バージョンNo: 1
1/5P

5 変更履歴の閲覧

- 1 ナビゲーションバーの[検査依頼一覧]をクリックする
検査依頼検索画面が表示されます。

The screenshot shows a search form titled '検索条件' (Search Conditions) with the following fields and options:

- 検査依頼日 (Test Order Date): 2025年12月12日 ~ 2026年03月12日
- その他No (匿名化ID) (Other No (Anonymized ID)): [] 担当医 (Attending Physician): []
- C-CAT登録ID (C-CAT Registration ID): [] C-CAT検体識別番号 (C-CAT Specimen Identification Number): [] C-CAT患者識別ID (C-CAT Patient Identification ID): []
- ステータス (Status): 依頼前 (Before Request) 依頼済 (Requested) 受付済 (Received) 検体処理中 (Specimen Processing) 一時停止 (Temporary Stop) 検査中 (In Progress) 検査中止 (Test Canceled) 検査完了 (Test Completed) 訂正 (Correction)
- Buttons: 検索 (Search), クリア (Clear)

Below the search form is the '検索結果' (Search Results) section, which includes a table and a '表示設定保存' (Save Display Settings) button.

	依頼日	検査依頼ID	検査の状態	その他No (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID
	2026年03月12日	TT000000000005	依頼済	777	男	テスト医	テスト科	123456789101
	2026年03月12日	TT000000000004	依頼済					
	2026年03月12日	TT000000000003	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667
	2026年03月12日	TT000000000002	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334

Additional elements include a 'CSVダウンロード' (Download CSV) button and navigation arrows.

- 2 検索条件を入力し、[検索]ボタンをクリックする
検索条件に一致する検査依頼が、検索結果に表示されます。
- 3 検索結果一覧から変更履歴を確認する検査依頼情報の右端にある[🔍]アイコンをクリックする。変更履歴画面が表示されます。

The screenshot shows a table titled '変更履歴' (Change History) with the following columns:

変更履歴登録日時	履歴種別	検査依頼病院	中核/拠点病院	検査センター	状態	検査用ID	診療科	入院・外来	提出医	患者ご 調
2023/07/28 10:27:00	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/28 10:26:45	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査中		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:32:57	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:32:50	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査中		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:30:20	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:30:12	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査中		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:28:05	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/07/05 18:27:51	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査中		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み
2023/06/30 15:45:46	更新	デモ用病院 (連携病院)	デモ用病院 (中核病院)	デモ検査センター	検査完了		テスト診療科 0	入院	テスト提出医 0	同意済み

A '閉じる' (Close) button is located at the bottom right of the table.

- 4 [閉じる]ボタンをクリックする
変更履歴画面を閉じます。

6 検査依頼一覧画面

検査依頼一覧画面は、以下で構成されています。

1 検索条件

検査依頼日 ~

その他No (匿名化ID) 担当医

C-CAT登録ID C-CAT検体識別番号 C-CAT患者識別ID

ステータス 依頼前 依頼済 受付済 検体処理中 一時停止 検査中 検査中止 検査完了 訂正

2 検索結果

	依頼日	検査依頼ID	検査の状態	その他No (匿名化ID)	患者性別	担当医	診療科	C-CAT患者識別ID
	2026年03月12日	TT000000000005	依頼済	777	男	テスト医	テスト科	123456789101
	2026年03月12日	TT000000000004	依頼前					
	2026年03月12日	TT000000000003	一時停止	333	女	テスト医	テスト科	1122334455667
	2026年03月12日	TT000000000002	検査中止	333	男	テスト医	テスト科	1111222233334

No	項目名	説明
①	検索条件	検索する検査依頼の条件を設定するエリアです。
	[<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="^"/>]アイコン	検索条件エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[検査依頼日]	検索する検査依頼の検査依頼日を指定します。
	[その他 No (匿名化 ID)]	検索する検査依頼のその他 No (匿名化 ID) を入力します。
	[担当医]	検索する検査依頼の提出医を入力します。
	[C-CAT 登録 ID]	検索する検査依頼の C-CAT 登録 ID を入力します。
	[C-CAT 検体識別番号]	検索する検査依頼の C-CAT 検体識別番号を入力します。

No	項目名	説明
	[C-CAT 患者識別 ID]	検索する検査依頼の C-CAT 患者識別 ID を入力します。
	[ステータス]	検索する検査依頼の進捗状態を選択します。
	[検索]ボタン	入力した検索条件で、検索をおこないます。
	[クリア]ボタン	検索条件に入力した情報を破棄します。
②	検索結果	検査依頼の検索結果を表示するエリアです。
	[]アイコン	レポートのダウンロードをおこないます。
	[]アイコン	検査依頼の詳細を表示します。
	[]アイコン	検査依頼の編集をおこないます。
	[]アイコン	検査依頼申込書を出力します。
	[]アイコン	検査依頼の変更履歴を表示します。
	[表示設定保存] ボタン	表示されているタブの並び順をユーザー単位で保存します。
	[CSV ダウンロード] ボタン	検索結果一覧の内容を CSV ファイル形式でダウンロードします。

4.8 アカウントを管理する

1 アカウントの登録

- 1 ナビゲーションバーの[アカウント]をクリックする
アカウント一覧画面が表示されます。



- 2 アカウント一覧画面左下の[新規登録]ボタンをクリックする
アカウント登録画面が表示されます。

The screenshot shows the "アカウント登録" (Account Registration) form. It includes input fields for "ログインID" (Login ID), "名前" (Name), and "メールアドレス" (Email Address), and a dropdown menu for "権限" (Permissions). The "メールアドレス" field is pre-filled with "info@system-cna.co.jp". There are "登録" (Register) and "戻る" (Back) buttons at the bottom right.

- 3 アカウント登録画面の内容（[ログイン ID][名前][メールアドレス][権限]）を入力し、[登録]ボタンをクリックする
実行確認メッセージが表示されます。

The screenshot shows a confirmation dialog box titled "確認" (Confirmation). The message reads: "登録します よろしいですか？" (Do you want to register? Is it okay?). There are two buttons: "はい" (Yes) and "いいえ" (No).


- 4 [はい]（登録しない場合は[いいえ]）ボタンをクリックする
アカウント登録完了のメッセージが表示されます。



5 [OK]ボタンをクリックする

アカウント一覧画面に画面遷移します。

登録したメールアドレスにアカウント発行メールが送信されるので、記載されているログイン情報でログイン処理をおこなってください。

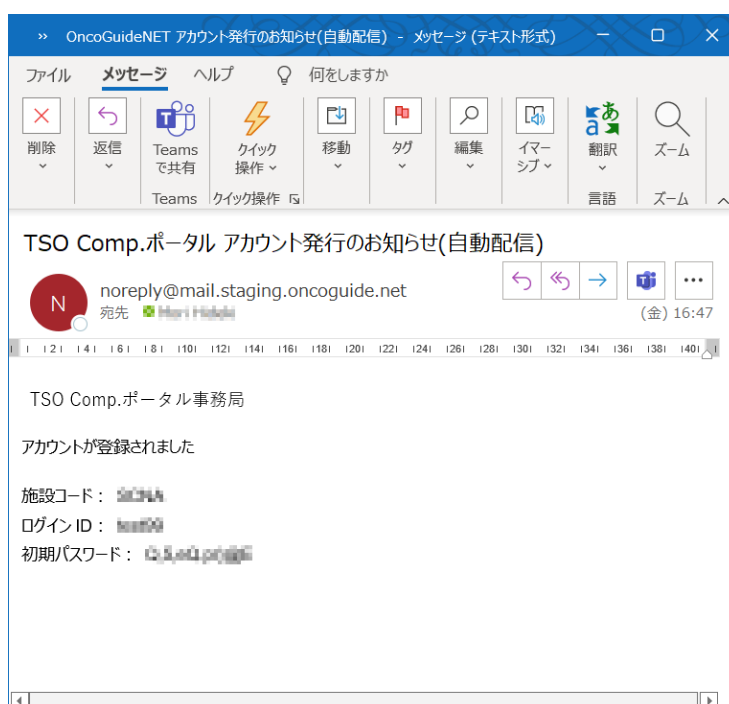


2 アカウントの編集

- 1 ナビゲーションバーの[アカウント]をクリックする
アカウント一覧画面が表示されます。



- 2 アカウント一覧から編集対象のアカウントを選択し、アカウント画面左下の[編集]ボタンをクリックする
アカウント編集画面が表示されます。

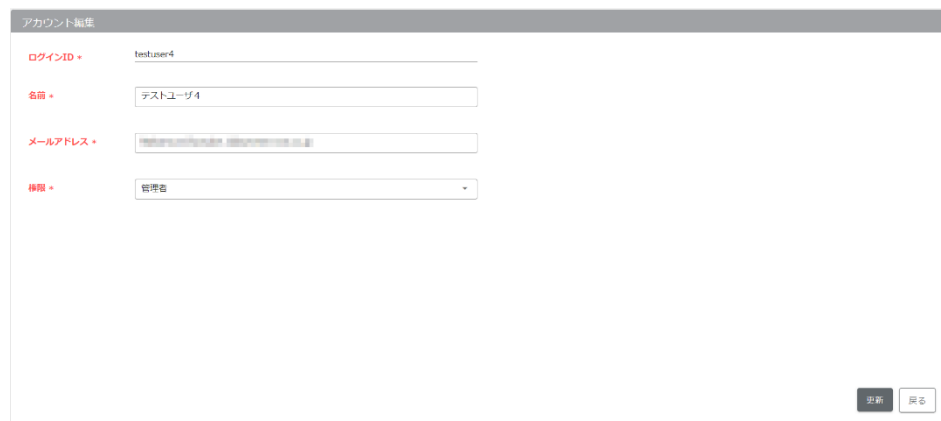

- 3 必要に応じて、アカウント編集画面の内容（[名前][メールアドレス][権限]）を編集し、[更新]ボタンをクリックする
※ログインIDの編集はできません。
実行確認メッセージが表示されます。



- 4 [はい]（更新しない場合は[いいえ]）ボタンをクリックする

アカウント更新完了のメッセージが表示されます。




- 5 [OK]ボタンをクリックする
アカウント一覧画面に画面遷移します。

3 アカウントの削除


- 1 ナビゲーションバーの[アカウント]をクリックする
アカウント一覧画面が表示されます。



- 2 アカウント一覧から削除対象のアカウントを選択し、アカウント画面左下の[削除]ボタンをクリックする
実行確認メッセージが表示されます。

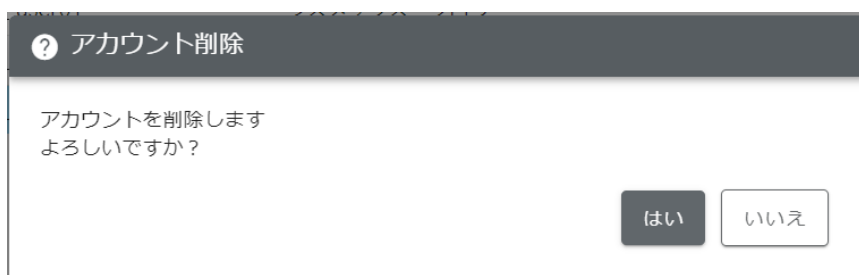

- 3 [はい] (削除しない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
アカウント削除完了のメッセージが表示されます。

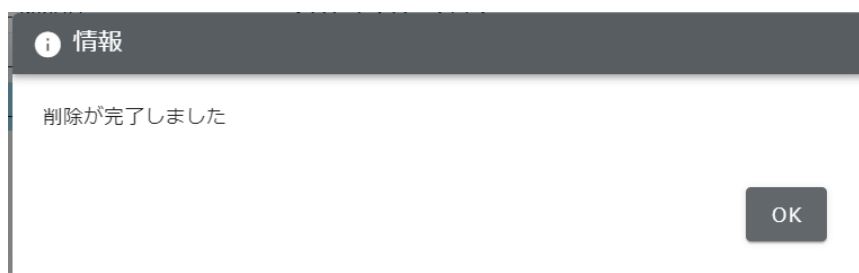

- 4 [OK]ボタンをクリックする
アカウント一覧画面が表示されます。

4 (管理者による) パスワードの初期化


- 1 ナビゲーションバーの[アカウント]をクリックする
アカウント一覧画面が表示されます。



- 2 アカウント一覧からパスワード初期化対象のアカウントを選択し、アカウント画面右下の[パスワード初期化]ボタンをクリックする
実行確認メッセージが表示されます。




- 3 [はい] (初期化しない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
パスワード初期化完了のメッセージが表示されます。

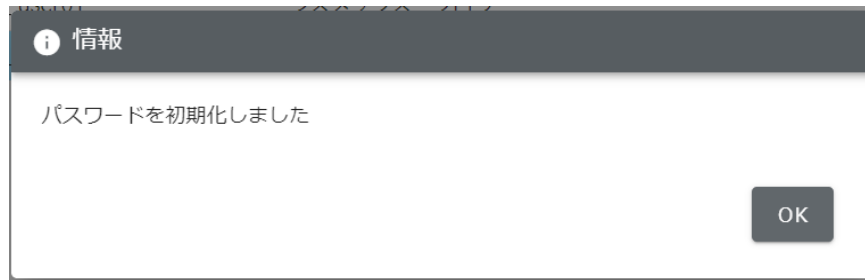

4 [OK]ボタンをクリックする

アカウント一覧画面が表示されます。

アカウント情報に登録されているメールアドレス宛てに[TSO Comp.ポータル パスワード初期化のお知らせ(自動配信)]が送信されるので、記載されているログイン情報でログイン処理をおこないます。

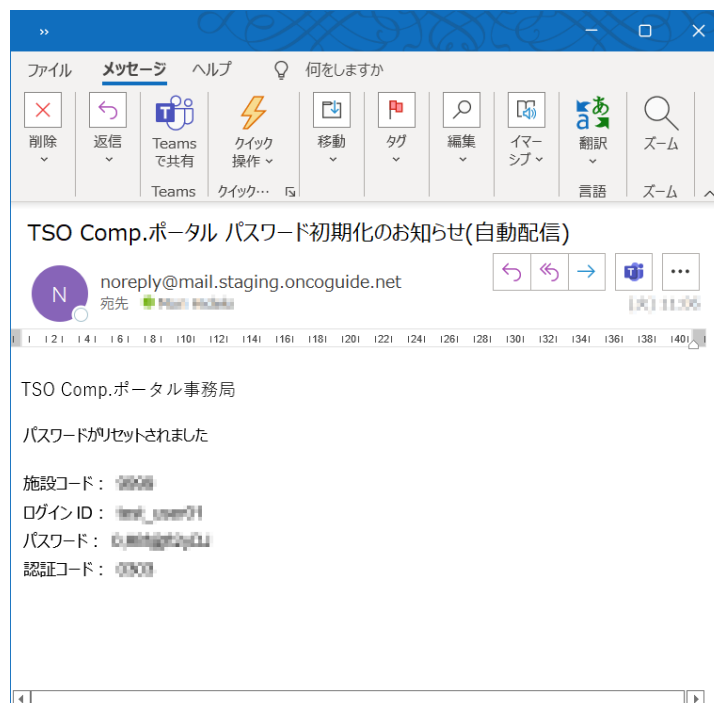

5 アカウント管理画面

アカウント管理画面は、以下で構成されています。

①

検索条件

ログインID 氏名

メールアドレス 権限 一般 管理者

②

アカウント一覧

権限	ログインID	氏名	メールアドレス
一般	demo9999_1	デモ シロウ	Mari.Hideki@system-cra.co.jp
管理者	demo9999	デモ タロウ	Mori.Hideki@system-cra.co.jp
管理者	test_user01	シスメックス タロウ	Mori.Hideki@system-cra.co.jp
一般	test_user02	シスメックス ハナコ	Mari.Hideki@system-cra.co.jp

< 1 >

No	項目名	説明
①	検索条件	検索するアカウントの条件を設定するエリアです。
	[<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="^"/>]アイコン	検索条件エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[ログイン ID]	検索するアカウントのログイン ID を入力します。
	[氏名]	検索するアカウントの氏名を入力します。
	[メールアドレス]	検索するアカウントのメールアドレスを入力します。
	[権限]	検索するアカウントの権限を選択します。
	[検索]ボタン	入力した検索条件で、検索をおこないます。
	[クリア]ボタン	検索条件に入力した情報を破棄します。
②	アカウント一覧	登録済みアカウントの一覧を表示するエリアです。
	[表示設定保存]ボタン	表示されているタブの並び順を保存します。
	[新規登録]ボタン	アカウントの新規登録をおこないます。

No	項目名	説明
	[編集]ボタン	アカウント一覧で選択したアカウント情報の編集をおこないます。
	[削除]ボタン	アカウント一覧で選択したアカウントの削除をおこないます。
	[パスワード初期化]ボタン	アカウント一覧で選択したアカウントのパスワードの初期化をおこないます。

6 アカウント登録・編集画面

アカウント登録・編集画面は、以下で構成されています。

1

アカウント編集

ログインID

名前

メールアドレス

権限

更新 戻る

No	項目名	説明
①	アカウント編集	アカウントを編集するエリアです。
	[ログイン ID]	登録するアカウントのログイン ID を入力します。
	[名前]	登録するアカウントの氏名を入力します。
	[メールアドレス]	登録するアカウントのメールアドレスを入力します。
	[権限]	登録するアカウントの権限を選択します。
	[登録]ボタン	入力された情報で、アカウントの新規登録をおこないます。
	[更新]ボタン	入力された情報で、アカウントの更新をおこないます。
	[戻る]ボタン	アカウント一覧画面に遷移します。

4.9 ダウンロード履歴を検索する

1 ダウンロード履歴の検索

- 1 ナビゲーションバーの[ダウンロード履歴]をクリックする
ダウンロード履歴一覧画面が表示されます。

検索条件

ダウンロード日 ~

ファイル種別 検査完了レポート 検査中止レポート 一時停止レポート 申込書

C-CAT登録ID C-CAT検体識別番号

C-CAT検査会社受付ID C-CAT患者識別ID

ユーザー名 ファイル名

ダウンロード履歴

ダウンロード日時	ファイル名	ファイル種別	ユーザー名
対象データがありません			

- 2 検索条件の内容（[ダウンロード日][ファイル種別][C-CAT 登録 ID][C-CAT 検体識別番号][C-CAT 検査会社受付 ID][C-CAT 患者識別 ID][ユーザー名][ファイル名]）を入力し、[検索]ボタンをクリックする
条件に一致した情報がダウンロード履歴エリアに表示されます。

ダウンロード履歴

表示設定保存

ダウンロード日時	ファイル種別	ファイル名	ユーザー名
2022/12/22 14:45:24	RG_QCReport_123456789012: デモ	タロウ	
2022/12/19 23:16:11	RG_SummaryReport_1234567	ラボ タロウ	
2022/12/19 23:16:11	RG_QCReport_123456789012: ラボ	タロウ	
2022/12/19 23:11:54	RG_SummaryReport_1234567	ラボ タロウ	
2022/12/19 23:02:58	RG_QCReport_123456789012: ラボ	タロウ	
2022/12/19 16:00:42	sequencing_report_123456789: センター	タロウ	
2022/12/19 16:00:42	report_1234567890123456789: センター	タロウ	
2022/12/19 16:00:42	qc_report_1234567890123456: センター	タロウ	
2022/12/19 16:00:42	summary_report_1234567890: センター	タロウ	
2022/12/19 15:55:30	sequencing_report_123456789: センター	タロウ	

< 1 2 3 4 5 >

CSVダウンロード

- 3 必要に応じて) [CSV ダウンロード]ボタンをクリックする
確認メッセージが表示されます。

? CSVダウンロード

CSVをダウンロードします
よろしいですか？

- 4 [はい] (ダウンロードしない場合は[いいえ]) ボタンをクリックする
ダウンロード履歴一覧の内容を CSV ファイル形式でダウンロードします。

2 ダウンロード履歴画面

ダウンロード履歴画面は、以下で構成されています。

1

検索条件

ダウンロード日 ~

ファイル種別 検査完了レポート 検査中止レポート 一時停止レポート 申込書

C-CAT登録ID C-CAT検体識別番号

C-CAT検査会社受付ID C-CAT患者識別ID

ユーザー名 ファイル名

2

ダウンロード履歴

ダウンロード日時	ファイル名	ファイル種別	ユーザー名
対象データがありません			

No	項目名	説明
①	検索条件	検索するダウンロード履歴の条件を設定するエリアです。
	[<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="^"/>]アイコン	検索条件エリアの表示を切り替えます（表示/非表示）。
	[ダウンロード日]	検索するダウンロード履歴のダウンロード日を指定します。
	[ファイル種別]	検索するダウンロード履歴のファイル種別を選択します。
	[C-CAT 登録 ID]	検索するダウンロード履歴の C-CAT 登録 ID を入力します。
	[C-CAT 検体識別 番号]	検索するダウンロード履歴の C-CAT 検体識別番号を入力します。
	[C-CAT 検査会社 受付 ID]	検索するダウンロード履歴の C-CAT 検査会社受付 ID を入力します。
	[C-CAT 患者識別 ID]	検索するダウンロード履歴の C-CAT 患者識別 ID を入力します。

No	項目名	説明
	[ユーザー名]	検索するダウンロード履歴のユーザー名を入力します。
	[ファイル名]	検索するダウンロード履歴のファイル名を入力します。
	[検索]ボタン	入力した検索条件で、検索をおこないます。
	[クリア]ボタン	検索条件に入力した情報を破棄します。
②	ダウンロード履歴	検索結果のダウンロード履歴が表示されるエリアです。
	[CSVダウンロード] ボタン	検索結果一覧の内容を CSV ファイル形式で出力します。

4.10 各種通知メールの受信設定をおこなう

1 検査ステータス通知メールの受信設定

- 1 ナビゲーションバーの[施設詳細]をクリックする
施設詳細画面が表示されます。



施設詳細

以下のチェックボックスにチェックを入れ、メールアドレスを設定する事で、ポータルよりメール通知を受けることができます。

※メール送付タイミングは以下の4点です。

- 検査一時停止
- 検査完了
- 検査中止
- 訂正

※貴院のすべての症例に対するメールが設定されたメールアドレスすべてに送付されます。

検査ステータス通知メールを受け取る

更新

- 2 「検査ステータス通知メールを受け取る」をチェックする
検査ステータス通知先入力欄が表示されますのでメールアドレスを入力します。



施設詳細

以下のチェックボックスにチェックを入れ、メールアドレスを設定する事で、ポータルよりメール通知を受けることができます。

※メール送付タイミングは以下の4点です。

- 検査一時停止
- 検査完了
- 検査中止
- 訂正

※貴院のすべての症例に対するメールが設定されたメールアドレスすべてに送付されます。

検査ステータス通知メールを受け取る

検査ステータス通知先 +

更新

- 3 （通知先を複数登録する場合）検査ステータス通知先入力欄の右にある[+（プラス）]ボタンをクリックする
検査ステータス通知先入力欄が追加されますのでメールアドレスを入力します。

施設詳細

以下のチェックボックスにチェックを入れ、メールアドレスを設定する事で、ポータルよりメール通知を受けることができます。

※メール送付タイミングは以下の4点です。

- 検査一時停止
- 検査完了
- 検査中止
- 訂正

※貴院のすべての症例に対するメールが設定されたメールアドレスすべてに送付されます。

検査ステータス通知メールを受け取る

検査ステータス通知先

- 4 検査ステータス通知先を入力し[更新]ボタンをクリックする
確認メッセージが表示されます。

確認

更新します
よろしいですか？

- 5 [はい]（更新しない場合は[いいえ]）ボタンをクリックする
施設詳細更新完了のメッセージが表示されます。

情報

更新しました

- 6 [OK]ボタンをクリックする
施設詳細画面が表示されます。

2 施設詳細画面

施設詳細画面は、以下で構成されています。

1

施設詳細

以下のチェックボックスにチェックを入れ、メールアドレスを設定する事で、ポータルよりメール通知を受けることができます。

※メール送付タイミングは以下の4点です。

- 検査一時停止
- 検査完了
- 検査中止
- 訂正

※貴院のすべての症例に対するメールが設定されたメールアドレスすべてに送付されます。

検査ステータス通知メールを受け取る


検査ステータス通知先

No	項目名	説明
①	施設詳細	施設詳細を設定するエリアです。
	検査ステータス通知メールを受け取る	検査ステータス通知メールを受け取る場合にチェックします。
	検査ステータス通知先	検査ステータス通知先に設定するメールアドレスを入力します。
	[+ (プラス)] アイコン	検査ステータス通知先入力欄の数を増やします。
	[- (マイナス)] アイコン	検査ステータス通知先入力欄の数を減らします。 ※設定済みのメールアドレスを通知先から削除します。
	[更新]ボタン	入力された情報で、施設詳細の更新をおこないます。

※日付を入力する

各画面の日付入力項目で、年月を変更する場合の操作手順は以下の通りです。

- 1 日付入力項目をクリックする

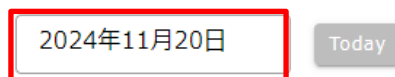

- 2 日付入力画面が表示されるので、画面上部中央をクリックする



- 3 月を選択する画面が表示されるので、画面上部中央部をクリックする
※年の変更が不要な場合は、本手順を実施せず手順5に進む



4 年を選択する画面が表示されるので、入力したい年をクリックする



5 月を選択する画面に戻るので、入力したい月をクリックする



6 日を選択する画面に戻るので、入力したい日をクリックする



7 選択した年月日が日付入力項目に反映される

